


OTOSAN® NASAL SPRAY Baby

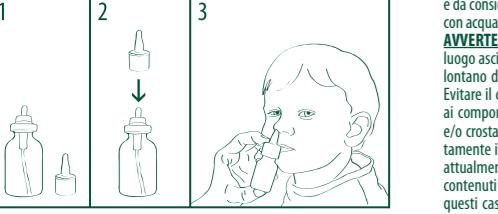

IT

SOLUZIONE IPERTONICA DI ACQUA
DI MARE DI BRETAGNA CON ALOE VERA GEL BIO,
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO BIO, RAME
GLUCONATO E CARBOSSIMETILBETAGLUCANO.

DESTINAZIONE D'USO. Il dispositivo medico Otosan® Nasal Spray Baby è un decongestionante nasale per uso topico. Associa le proprietà della soluzione ipertonica di acqua di mare di Bretagna all'azione combinata dell'Aloe Vera Gel Biologico, dell'olio essenziale di Arancio Bio, del Rame gluconato e del Carbossimetilbetaglucano. La multi-azione di Otosan® Nasal Spray Baby si esplica localmente igienizzando le fosse nasali, liberando il naso dal muco in eccesso e aiutando a ridurre la congestione nasale. La sua formulazione delicata e priva di vasoconstriutori ne fa un prodotto particolarmente indicato in età pediatrica, nelle donne in gravidanza o in allattamento e nei cardiopatici; in questi casi prima di utilizzare il dispositivo medico si consiglia sempre di consultare il medico. Non contiene gas propellenti.

INDICAZIONI. Otosan® Nasal Spray Baby è indicato come trattamento coadiuvante di primo impiego in presenza di processi infiammatori quali riniti di diversa origine (virali, batteriche o allergiche), sinusiti e secca-za delle mucose nasali, anche in seguito a operazioni chirurgiche.

POSOLOGIA. 1 nebulizzazione per narice 2-4 volte al giorno, per 10-15 giorni.

DESCRIZIONE. Otosan® Nasal Spray Baby è utile come coadiuvante nel trattamento della rinitis acuta o rinosinusite, indipendentemente dalla causa che l'ha originata. I componenti del prodotto aiutano l'espulsione del muco in eccesso ed inoltre hanno effetti protettivi, emollienti e lenitivi sulla mucosa irritata. Allo stesso tempo, Otosan® Nasal Spray Baby igienizza le cavità nasali grazie alla ipertonicità della soluzione ed

all'azione di alcuni componenti che, richiamando l'acqua dalla mucosa, fluidificano il muco favorendo l'allontanamento di virus, batteri, pollini, macro e micro particelle. Il dispositivo medico è utile anche in casi di ecceziva secca-za delle mucose nasali. Otosan® Nasal Spray Baby induce sollovente, e crea un ambiente favorevole alla crescita batterica prevenendo le riacutizzazioni.

TOLLERABILITÀ. L'assenza di vasoconstriutori e l'azione gentile dei suoi principi attivi rendono Otosan® Nasal Spray Baby un prodotto ben tollerato, per il quale ad oggi non sono noti effetti collaterali e controindicazioni e il cui uso frequente non comporta assuefazione e rischi di "rinite medicamentosa".

ISTRUZIONI PER L'USO.

Soffarsi il naso prima della nebulizzazione. Spruzzare la soluzione in ogni narice, tenendo la testa in posizione verticale. Dopo la nebulizzazione, premere leggermente col dito indice sulla narice, al fine di assicurare una ripartizione della soluzione sull'intera mucosa nasale. Un leggero e temporaneo pizzicore in seguito all'applicazione è da considerarsi una normale azione del prodotto. Dopo l'uso, sciacquare con acqua tiepida il beccuccio e asciugarlo con un fazzoletto di carta.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI. Conservare il dispositivo medico in un luogo asciutto, lontano da fonti di luce diretta e a fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Non usare in caso di ipersensibilità nota ai componenti. Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso molluschi e/o crostacei. Non utilizzare per modi e scopi diversi da quelli specificamente indicati dal fabbricante in queste istruzioni per l'uso. Non sono attualmente conosciute controindicazioni all'utilizzo dei componenti contenuti in Otosan® Nasal Spray Baby in gravidanza o allattamento, in questi casi prima di utilizzare il prodotto consultare il proprio medico.

EN

A HYPERTONIC SEA WATER SOLUTION
CONTAINING SEA WATER FROM BRITTANY WITH
ORGANIC ALOE VERA GEL, ORGANIC ORANGE
ESSENTIAL OIL, COPPER GLUCONATE AND
CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN.

and it can be used often without causing tolerance or a risk of "rhinitis medicamentosa".

INSTRUCTIONS FOR USE. Blow your nose before using the spray. Spray the solution into each nostril, holding your head upright. After spraying, slightly press the nostril with your index finger so that the solution is distributed into the entire nasal mucosa. A slight and temporary tingling sensation after application is to be considered a normal effect of the product. After use, rinse the nozzle with warm water and dry it with a paper tissue.

DISPOSAL.

If the medical device has expired or is ready for disposal, please comply with the waste management regulations of your local management authority. Do not dispose of the product or its packaging in the environment for any reason.

ES

SOLUCIÓN HIPERTÓNICA DE AGUA DEL MAR
DE BRÉTANIA CON GEL DE ALOE VERA ECOLÓGICO,
ACEITE ESPECIAL DE NARANJA ECOLÓGICO,
COBRE GLUCONATO Y CARBOXIMÉTIL BETAGLUCANO.

it can be used often without causing tolerance or a risk of "rhinitis medicamentosa".

ADVERTENCES Y PRECAUCIONES.

Conservar el producto sanitario en

un lugar seco y al abrigo de fuentes de luz directa o de fuentes de calor. Conservar lejos del alcance de los niños. Sólo para uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes. No utilizar en caso de hipersensibilidad a crustáceos y/o moluscos. No utilizar para usos diferentes respecto a los expresamente indicados por el productor en estas instrucciones de uso. Actualmente no se conocen contraindicaciones al uso de los ingredientes que componen Otosan® Nasal Spray Baby durante el embarazo y la lactancia. En estos casos se recomienda consultar con su propio médico antes de utilizar el producto. En caso de efectos secundarios suspender el tratamiento. El producto contiene metales bivalentes, por ejemplo cobre, que son generalmente seguros. A pesar de ello, en raras ocasiones podrían provocar anosmia. En caso de efectos secundarios, interrumpir inmediatamente el tratamiento y consultar con el médico. La botella es para uso estrictamente personal: puede ser vehículo transmisor de infecciones.

FR

SOLUTION HYPERTONIQUE D'EAU DE MER
DE BRETAGNE À BASE DE GEL D'ALOE VERA BIO,
D'HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE BIO, DE CUIVRE
GLUCONATE ET DE CARBOXYMÉTHYL BÉTA-GLUCANE.

it can be used often without causing tolerance or a risk of "rhinitis medicamentosa".

IN UTILISATION.

Le dispositif médical Otosan® Nasal Spray Baby est un décongestionnant nasal à usage topique. Il associe les propriétés de la solution hypertonique d'eau de mer de Bretagne à l'action combinée du gel d'aloe vera bio, de l'huile essentielle d'orange bio, du cuivre gluconate et du carboxyméthyl bétaglucane. L'action multiple d'Otosan® Nasal Spray Baby agit localement en nettoyant les fosses nasales, en libérant le nez du mucus en excès et en aidant à réduire la congestion nasale. Otosan® Nasal Spray Baby est un décongestionnant délicat sans vasoconstricteurs, particulièrement indiqué chez l'enfant, chez la femme enceinte ou allaitante et chez les personnes atteintes de cardiopathie. Dans ces cas, demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament. Ne contient pas de gaz propulseur.

IN INDICATIONS. Otosan® Nasal Spray Baby peut être administré comme complément des traitements des inflammations, telles que les rhinites virales, bactériennes ou allergiques, les sinusites et la sécheresse des muqueuses nasales, y compris à la suite d'une intervention chirurgicale.

IN POSOLOGIE. 1 pulvérisation dans chaque narine 2 à 4 fois par jour, pendant 10 à 15 jours.

IN DESCRIPTION DU PRODUIT. Otosan® Nasal Spray Baby peut être administré en complément des traitements de la rhinite aigüe ou de la rhino-sinusite, quel qu'en soient leurs causes. Les composants du produit aident à empêcher l'excès de mucus et promeuvent l'expulsion.

IN POSOLOGIA. 1 nebulisation en cada narina de 2 a 4 veces por dia, entre 10 y 15 días.

IN DESCRIPCION. Otosan® Nasal Spray Baby es un producto de gran utilidad coadyuvante para tratar rinitis agudas o rinosinusitis, sin importar la causa que las ha provocado. Los ingredientes que componen el producto favorecen la expulsión del exceso de mucus y, además, producen efectos protectores, emolientes y lenitivos en la mucosa irritada. Al mismo tiempo, Otosan® Spray Nasal Baby limpia las cavidades nasales gracias a la solución hipertónica y a la acción de algunos de los ingredientes que lo componen ya que, al atraer el agua de la mucosa, hace más fluido el muco y permite alejar virus, bacterias, polen macro y micro particulares. El producto sanitario puede ser útil en caso de excesiva sequedad de las mucosas nasales. Otosan® Nasal Spray Baby produce alivio, y crea un ambiente desfavorable para el crecimiento de bacterias, con lo cual se previene la agudización de las condiciones.

IN MODE D'ADMINISTRATION. Se moucher au préalable. Maintenir la tête en position verticale et pulvériser la solution dans chaque narine. Après la pulvérisation, appuyer doucement sur la narine avec l'index pour bien étaler la solution sur toute la muqueuse nasale. Après l'application de la solution, vous pouvez ressentir un picotement léger et passager. Rincer l'embout pulvérisateur à l'eau tiède après chaque utilisation et l'essuyer avec une serviette en papier.

Otosan® Nasal Spray Baby est un dispositif médical marqué CE. Le produit est conforme à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

ser en cas d'hypersensibilité aux crustacés et/ou aux mollusques. N'utiliser que conformément à cette notice. A ce jour, aucune contre-indication n'est signalée pour les composants d'Otosan® Nasal Spray Baby chez la femme enceinte ou allaitante. En cas de grossesse ou d'allaitement, demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, arrêtez le traitement. Normalement, les produits contenant des métaux divalents - tels que le cuivre - sont sûrs. Cependant, ils pourraient provoquer des rares cas d'anosmie. En cas d'effets indésirables, arrêtez immédiatement le traitement et parlez-en à votre médecin. Le flacon est destiné à un usage personnel uniquement: il pourra véhiculer des infections.

IN COMO DESECHAR.

El producto vendido, o que de todas formas ha de ser eliminado, debe respetar el reglamento de gestión de residuos de la Entidad de Gestión Local. No dispersar el producto ni su empaque en el medio ambiente en ningún caso.

IN SOLUTION HYPERTONIQUE D'EAU DE MER DE BRETAGNE À BASE DE GEL D'ALOE VERA BIO, D'HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE BIO, DE CUIVRE GLUCONATE ET DE CARBOXYMÉTHYL BÉTA-GLUCANE.

IN UTILISATION. Le dispositif médical Otosan® Nasal Spray Baby est un décongestionnant nasal à usage topique. Il associe les propriétés de la solution hypertonique d'eau de mer de Bretagne à l'action combinée du gel d'aloe vera bio, de l'huile essentielle d'orange bio, du cuivre gluconate et du carboxyméthyl bétaglucane. L'action multiple d'Otosan® Nasal Spray Baby agit localement en nettoyant les fosses nasales, en libérant le nez du mucus en excès et en aidant à réduire la congestion nasale. Otosan® Nasal Spray Baby est un décongestionnant délicat sans vasoconstricteurs, particulièrement indiqué chez l'enfant, chez la femme enceinte ou allaitante et chez les personnes atteintes de cardiopathie. Dans ces cas, demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament. Ne contient pas de gaz propulseur.

IN INDICATIONS. Otosan® Nasal Spray Baby peut être administré comme complément des traitements des inflammations, telles que les rhinites virales, bactériennes ou allergiques, les sinusites et la sécheresse des muqueuses nasales, y compris à la suite d'une intervention chirurgicale.

IN POSOLOGIE. 1 pulvérisation dans chaque narine 2 à 4 fois par jour, pendant 10 à 15 jours.

IN DESCRIPTION DU PRODUIT. Otosan® Nasal Spray Baby peut être administré en complément des traitements de la rhinite aigüe ou de la rhino-sinusite, quel qu'en soient leurs causes. Les composants du produit aident à empêcher l'excès de mucus et promeuvent l'expulsion.

Otosan® Nasal Spray Baby est un dispositif médical marqué CE. Le produit est conforme à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

IN TRAITEMENT DU DISPOSITIF MÉDICAL PÉRIMÉ OU UTILISÉ

Ne pas jeter le dispositif médical ni son emballage dans la nature. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

